

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Центрифуга лабораторная CliniFuga, в вариантах исполнения

Модель: D1008



Перед использованием центрифуги внимательно прочитайте данное руководство пользователя для обеспечения ее эффективной работы и безопасности.

Авторское право:

Никакая часть данного руководства не может быть воспроизведена или передана без предварительного письменного разрешения производителя оригинала.

Мы не можем нести ответственность за информирование в режиме реального времени, если схема и технические характеристики центрифуги могут быть изменены для улучшения.

Сведения о производителе:

«ДЛАБ Саентифик Ко. Лтд» (DLAB Scientific Co., Ltd)
Юйань Роуд 31, Центральная экономическая зона пекинского аэропорта, район Шунь,
Пекин, 101318, Китай
(Yu'an Road 31, Beijing Airport Economic Core Zone, Shun Yi District, Beijing 101318 China)

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс Мануфактура» (ООО «Экспресс Мануфактура»)

Адрес: Россия, 143306, Московская область, г.о. Наро-Фоминский, г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д.28, помещ.50.

ИНН 7726454494. КПП 503001001. ОГРН 1197746400620.

Тел: +7-495-190-00-05

Электронная почта: info@expressm-test.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общая информация	3
2.	Инструкция по безопасности	4
3.	Необходимые рабочие условия	5
4.	Установка	6
5.	Устройство	7
6.	Панель управления	7
7.	Подготовка ротора	7
8.	Управление	8
9.	Текущее обслуживание	9
10.	Устранение неполадок	10
11.	Инструкции ротора	10
12.	Относительная сила центрифуги (RCF)	11
13.	Гарантии	11
14.	Послепродажное обслуживание	12
15.	Декларация соответствия	12
16.	Маркировка	12
17.	Упаковка	13
18.	Порядок утилизации или уничтожения изделия	13

1. Общая информация

Наименование изделия: Центрифуга лабораторная CliniFuga, в вариантах исполнения

Модель: D1008

Состав изделия

Центрифуга лабораторная CliniFuga, модель: D1008, в составе:

1. Центрифуга лабораторная – 1 шт.;
2. Сетевой шнур – 1 шт.;
3. Ротор A8-2P – 1 шт. (при необходимости);
4. Ротор A4-PCR8 – 1 шт. (при необходимости);
5. Руководство пользователя – 1 шт.

Описание изделия

Центрифуга лабораторная CliniFuga – это устройство, которое эксплуатируется в медицинской и научной практике ежедневно. Главная задача данного прибора заключается в разделении веществ по плотности и консистенции при помощи центробежной силы. Так, вещества, обладающие максимальным удельным весом, помещаются в периферию, а фракции, обладающие минимальным удельным весом, становятся ближе к оси вращения. Не подходит для использования в потенциально взрывоопасной атмосфере, что обусловлено конструктивными особенностями устройства и условиями внутри него. Устройство разрешается использовать только в безопасной атмосфере, например, в открытой среде проветриваемой лаборатории или в зоне работы вытяжки. Использовать вещества, которые могут создать потенциально взрывоопасную атмосферу, запрещается. Окончательное решение в отношении рисков, связанных с использованием таких веществ, принимает пользователь.

Показания к применению

Для центробежного разделения образцов крови или мочи человека.

Противопоказания и побочные эффекты

В случае применения по назначению, в соответствии с эксплуатационной документацией, противопоказания к применению и побочные эффекты отсутствуют.

Потенциальные пользователи медицинского изделия

Медицинские работники, лаборанты.

Область применения

Центрифуга лабораторная CliniFuga предназначена для применения в клиническо-диагностических лабораториях ЛПУ (лечебно-профилактические учреждения).

Совместное использование медицинских изделий

Допускается совместное применение с пробирками, устанавливаемыми в ротор изделия.

Технические характеристики устройства

Параметр	Значение
Максимальная скорость	7000 об/мин
Максимальный RCFx g	2680
Высота макс. рабочая (над уровнем моря)	2000 м
Требования к питанию устройства	Однофазный 100-240В, 50/60 Гц, 20Вт
Тип двигателя	Бесщеточный постоянного тока
Таймер	Непрерывная работа
Безопасность	Блокировка крышки
Предохранительные устройства	-
Сетевой адаптер	-
Габариты [Д×Ш×В мм] Допуск ± 10%	170 x 160 x 122
Масса, допуск ± 10%	0,5 кг
Ускорение / Замедление	-
Дисплей	-
Звуковое оповещение	-
Уровень шума	< 45 дБ

Степень загрязнения	2
Сетевой шнур	AC250 В, 2,5 А, 2G 0,75 мм ²
Класс защиты	II
Категория защиты от перенапряжения	II
Степень защиты	IP20
Режимы работы	-
Ротор	A8-2P; A4-PCR8
Шаг установки скорости, об/мин	-
Точность (об/мин)	± 20
Электромагнитная совместимость/ Излучаемые помехи Помехоустойчивость	FCC Класс А EN/IEC 61326-1 Класс А
Программное обеспечение	-
Классификация изделия в зависимости от воспринимаемых механических воздействий (ГОСТ Р 50444-2020)	2 – носимые, переносные и передвижные, не предназначенные для работы при переносках и передвижениях в пределах стационарного помещения

Применяемые производителем стандарты

ISO 13485:2016

EN 61010-1

EN 61010-2-020

N 61010-2-020

EN 61326-1/FCC Часть 15 Подраздел В/ IEC 60601-1

EMC-руководящие принципы: 2004/108/ЕС

Руководящие принципы по приборам: 2006/95/ЕС

2. Инструкция по безопасности

2.1 Использование по назначению

Настоящее руководство пользователя распространяется на медицинское изделие «Центрифуга лабораторная CliniFuga», модель: D1008.

Назначение изделия: Предназначена для разделения образцов биологических жидкостей человека (крови и мочи) в поле центробежных сил в целях проведения диагностики методом in vitro.

2.2 Общие меры предосторожности

Внимательно прочитайте следующие меры предосторожности для полного понимания.

★ Следуйте инструкциям и процедурам, описанным в данном руководстве для безопасного управления данной центрифугой.

★ Внимательно ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности в данном руководстве и инструкции по технике безопасности на приборе.

Сообщения о безопасности помечены, как указано ниже. Они сочетаются с сигнальными словами «ВНИМАНИЕ» и «ОСТОРОЖНО» с символом предупреждения о безопасности, чтобы привлечь ваше внимание к предметам или операциям, которые могут быть опасны для вас или других лиц, использующих этот инструмент.

Определения сигнальных слов представлены ниже:

⚠ **ВНИМАНИЕ:** опасно для жизни

Предупреждающие примечания указывают на любое условие или практику, которые, если их строго не соблюдать, могут привести к травмам или возможной смерти.

⚠ **ОСТОРОЖНО:** возможно повреждение прибора

Примечания с предостережением указывают на любое условие или практику, которые, если они не будут строго соблюдаться или исправлены, могут привести к повреждению или разрушению прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ: примечания указывают на область или предмет особых достоинств, подчеркивая либо возможности продукта, либо распространенные ошибки в эксплуатации или техническом обслуживании.

★ Не используйте эту центрифугу каким-либо образом, не описанным в данном руководстве пользователя. Если вы сомневаетесь или у вас возникли какие-либо проблемы с этой центрифугой, **ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ.**

★ Меры предосторожности, описанные в данном руководстве пользователя, тщательно разработаны с целью покрытия всех

возможных рисков. Однако также важно, чтобы вы были готовы к неожиданным инцидентам. Будьте осторожны при работе с этой центрифугой.



ВНИМАНИЕ :

- ★ Эта центрифуга не является взрывозащищенной. Никогда не используйте взрывоопасные или легковоспламеняющиеся образцы.
- ★ Не устанавливайте центрифугу в местах образования легковоспламеняющихся газов или хранения химических веществ или вблизи них.
- ★ Не размещайте опасные материалы в пределах 50 см вокруг центрифуги.

- Обязательно подготовьте необходимые меры безопасности перед использованием образцов, которые патогенными микроорганизмами, под свою ответственность (при работе с подобными образцами необходимо ношение защитных перчаток, маски и очков).
- Если прибор, ротор и/или принадлежности были загрязнены растворами с токсичными, радиоактивными или патогенными материалами, очистите их в соответствии с указанной вами процедурой обеззараживания.
- Если вам требуются услуги на месте, пожалуйста, заранее обеззараживайте его, а затем сообщите в сервисный центр, занимающийся деталями конкретных материалов.
- Не трогайте шнур питания и не включайте, и не выключайте выключатель питания мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.
- В целях безопасности не входите в радиусе 50 см вокруг этой центрифуги во время ее работы.
- Во время вращения ротора никогда не отпирайте замок крышки принудительно.
- Несанкционированный ремонт, разборка и другие услуги центрифуги, кроме как в нашем сервисном центре, строго запрещены.

3. Необходимые рабочие условия



ОСТОРОЖНО

- ★ Эта центрифуга должна располагаться на одном твердом и ровном столе.
- ★ Перед запуском убедитесь, что центрифуга находится в горизонтальном положении.
- ★ При открытии крышки ротора убедитесь, что угол между крышкой центрифуги и крышкой ротора превышает 70 градусов.
- ★ Будьте осторожны, не кладите пальцы или руки между крышкой центрифуги и крышкой ротора, когда крышка центрифуги открыта.
- ★ Не перемещайте и не перемещайте эту центрифугу во время ее работы.
- ★ Если жидкость прольется в камеру ротора, пожалуйста, быстро очистите и высушите сухой тканью, чтобы избежать загрязнения образца.
- ★ Перед запуском этой центрифуги убедитесь, что все предметы и фрагменты пробирок, упавшие в камеру ротора, удалены.
- ★ Предостережения для роторов:
 1. Всегда проверяйте наличие коррозии и повреждений на поверхности ротора перед его использованием. Не используйте ротор, если обнаружена аномалия.
 2. Не устанавливайте скорость центрифуги выше допустимой минимальной скорости комплектов роторов (ротора).
 3. Убедитесь, что он работает ниже допустимой минимальной скорости.
 4. Не превышайте допустимый дисбаланс.
 5. Используйте ротор и пробирки в пределах их фактической мощности.
 6. Убедитесь, что ротор закрыт крышкой (при наличии) перед запуском работы.
 7. Если во время работы возникает какое-либо ненормальное состояние, пожалуйста, немедленно прекратите его и обратитесь в наш сервисный центр. Уведомить сервисный центр – это код предупреждения, если он отображается.
 8. Вибрации могут привести к повреждению центрифуги,

обратитесь в наш сервисный центр, если обнаружена аномалия.

3.1 Основные условия эксплуатации

1. Требование к питанию устройства: Однофазный, 100-240В, 50/60 Гц, 20Вт
2. Температура окружающей среды: +10 °C - +35 °C.
3. Относительная влажность: $\leq 80 \%$.
4. Отсутствие вибрации и воздушного потока вокруг.
5. Отсутствие электрической пыли, взрывоопасных и едких газов вокруг.
6. Время выхода на рабочий режим: 10 мин.

3.2 Условия транспортировки и хранения

- (1) Упакованные изделия могут перевозиться любым видом транспорта при условии защиты от атмосферных осадков и соблюдения мер предосторожности и правил перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.
- (2) Изделия в заводской упаковке должны храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.
- (3) Условия транспортировки и хранения:
 - Температура: от -40 °C до +55 °C.
 - Относительная влажность: $\leq 93 \%$.

4. Установка

В этом разделе описаны инструкции, которые вы должны соблюдать при установке центрифуги, чтобы обеспечить свою безопасность и оптимальную производительность. Перед перемещением центрифуги необходимо снять ротор.

ВНИМАНИЕ :

★ Неправильное питание может привести к повреждению центрифуги.

★ Перед подключением убедитесь, что источник питания соответствует требуемому источнику питания.

4.1 Размещение

1. Поместите центрифугу на твердый, плоский и ровный стол, убедитесь, что четыре ножки этой центрифуги твердо стоят на столе. Избегайте установки на скользкую поверхность или поверхность, подверженную вибрации.
2. Идеальная температура окружающей среды составляет $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, избегайте размещения центрифуги под прямыми солнечными лучами, если температура превышает 30°C .
3. Устанавливайте центрифугу на расстоянии не менее 10 см с обеих сторон и не менее 50 см позади нее, чтобы гарантировать эффективность охлаждения.
4. Держите подальше от тепла или воды, чтобы избежать проблем с температурой образца или сбоев центрифуги.

4.2 Информация в соответствии с ГОСТ IEC 61010-2-020-2013, п. 5.4.3:

1. Общий вес центрифуги: 0,5 кг (центрифуга) + вес ротора (от 12,0 г до 31,4 г)
2. Инструкции по подготовке рабочего места: см. п. 4.1
3. Методы нивелирования центрифуги: Геометрический (осуществляется в горизонтальной плоскости (вперед, назад, вправо, влево))
4. Средства крепления к монтажной поверхности: конструкция центрифуги предусматривает наличие четырех ножек

4.3 Информация в соответствии с ГОСТ IEC 61010-2-020-2013, п. 7.2.101:

1. Крышка закрыта и заблокирована при включенном приводе ротора и остается заблокированной до тех пор, пока окружная скорость блок ротора не будет менее 2 м/с.
2. При прерывании электропитания блокирующий механизм крышки не допускает ее открытия, последующее

- разблокирование возможно только с применением инструмента.
3. Крышка изделия зафиксирована с силой, достаточной для того, чтобы выдержать попадание осколков, возникшие в результате разрушения.


4.4 Подключение шнура питания и заземление

- ⚠ ВНИМАНИЕ :**
- ★ Во избежание поражения электрическим током убедитесь, что ваши руки сухие при прикосновении к шнуру питания.
 - ★ Эта центрифуга должна быть правильно заземлена.

4.5 Начало/ окончание работы

1. Включите питание на задней панели устройства.
2. Откройте крышку и поместите центрифужные пробирки симметрично на ротор.
3. Закройте центрифугу, чтобы начать процесс центрифугирования.
4. После окончания работы выключите питание и откройте крышку, ротор постепенно остановится.
5. Откройте крышку и соберите образцы.

5. Устройство

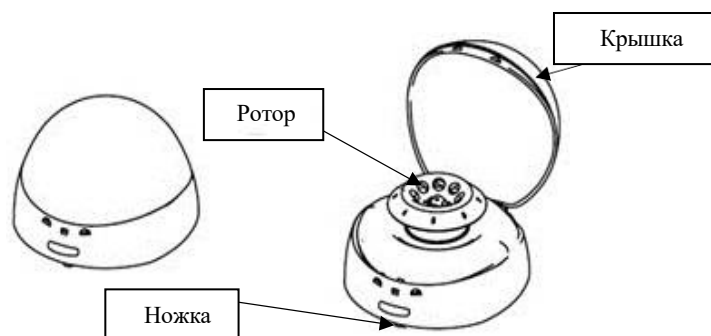

6. Панель управления

Для данной модели панель управления отсутствует.

7. Подготовка ротора

7.1 Подготовьте образцы

7.2 Дозирование образцов в пробирки

- ⚠ ОСТОРОЖНО :**
- ★ Не перегружайте образцы в центрифугу, что может привести к протечке.
 - ★ Не превышайте фактическую емкость, разрешенную в руководстве пользователя.
 - ★ При работе с образцами используйте защитные перчатки.

7.3 Держите пробирки в равновесии

- ★ Хотя центрифуга может работать с балансировкой образцов на глаз, мы рекомендуем работать на центрифуге в хорошо сбалансированном состоянии, чтобы продлить срок ее службы.
- ★ Никогда намеренно не запускайте центрифугу в несбалансированном состоянии, даже если допустимый дисбаланс не превышен.

7.4 Осмотрите ротор

Перед использованием проверьте ротор на наличие коррозии или царапин.

- ⚠ ОСТОРОЖНО :**
- ★ При обнаружении каких-либо отклонений, таких как коррозия или царапины, прекратите использование ротора и обратитесь в наш сервисный центр.
 - ★ С устройством должны использоваться только роторы производителя.

7.5 Симметрично загружайте центрифужные пробирки в ротор

⚠ ОСТОРОЖНО :


- ★ Убедитесь, что колпачок ротора надежно закреплен на роторе, а также что ротор и вал затянуты.
- ★ В противном случае ротор может сдвинуться во время вращения и привести к повреждению центрифуги и ротора.
- ★ Плотнo затяните колпачок ротора.

8. Управление

ОСТОРОЖНО :

- ★ Не нажимайте и не опирайтесь на центрифугу во время ее работы.
- ★ Не запускайте центрифугу, когда фрагменты или образцы растворов остаются в камере центрифуги. Всегда содержите центробежную камеру в чистоте.
- ★ Если центрифуга издает странный шум во время работы, немедленно остановите ее и обратитесь в наш сервисный центр.

Установка и замена ротора

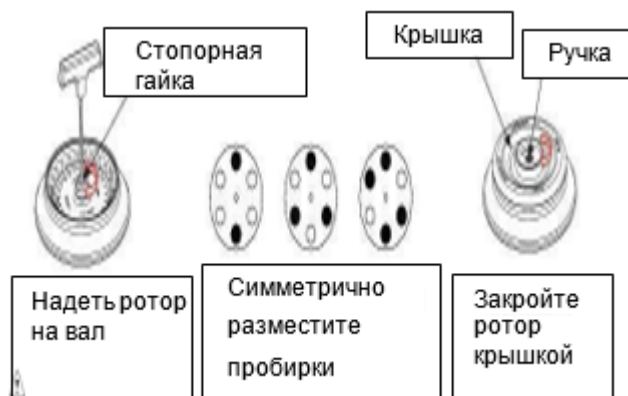

ОСТОРОЖНО

- ★ Прикрепите ротор к валу ротора. Убедитесь, что ротор находится в нужном положении и соединен с валом, затянув стопорную гайку, чтобы закрепить ротор с валом, чтобы предотвратить повреждение ротора центрифугой.
- ★ Убедитесь, что крышка ротора плотно прилегает к ротору.

Загрузите ротор на вал, чтобы убедиться, что ротор находится в нужном положении до тех пор, пока он не соединится с валом.

★ Вы должны почувствовать "щелчок", когда ротор правильно загружен на вал. Если нет, то между ротором и валом может что-то застрять. Дважды проверьте и очистите его, если это необходимо.

★ Слегка поверните ротор пальцами, чтобы проверить, вибрирует ли ротор. Если это так снова установите ротор на место.

★ Поверните гайку по часовой стрелке с помощью гаечного ключа, чтобы плотно затянуть ротор на валу.

★ Закройте крышку ротора, плотно затяните крышку по часовой стрелке к ротору и убедитесь, что она находится в нужном положении. После закрытия крышки центрифугу можно включать.

★ Способ снятия ротора такой же, как и вышеупомянутый, путем поворота стопорной гайки против часовой стрелки.

9. Текущее обслуживание

9.1 Очистка

ПРИМЕЧАНИЕ (здесь и далее): в качестве нейтральных моющих средств могут выступать любые коммерчески доступные катионактивные ПАВ, анионактивные ПАВ, амфолитные ПАВ, неионогенные ПАВ. В качестве дезинфицирующего средства используется 70%-ный раствор этанола.

⚠ ОСТОРОЖНО

Если не следовать рекомендуемым инструкциям по очистке или дезинфекции, это может привести к повреждению центрифуги.

Внимание: перед применением любых методов очистки или дезинфекции, отличных от рекомендованных изготовителем, пользователь должен согласовать с изготовителем, что предлагаемый метод не повредит оборудование

(1) Центрифуга

★ Если центрифуга подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей в течение длительного времени, цвет крышки может быть изменен или этикетка может быть снята. После использования накройте центрифугу куском ткани, чтобы защитить ее от прямого воздействия.

★ Если центрифуга нуждается в очистке, очистите ее тканью или губкой, смоченной нейтральным раствором моющего средства.

★ Очищайте центрифугу, протирая ее тканью, смоченной 70% - ным раствором этанола.

(2) Роторная камера

⚠ ОСТОРОЖНО

- Не наливайте непосредственно воду, нейтральный моющий или дезинфицирующий раствор в камеру ротора. В противном случае жидкости могут просочиться в приводные блоки и вызвать коррозию или износ подшипников.

Если камера ротора нуждается в очистке, протрите ее тканью или губкой, смоченной нейтральным моющим раствором. Очищайте центрифугу, протирая ее тканью, смоченной 70% - ным раствором

этанола (в т.ч. в случае попадания брызг опасного материала на поверхность или внутрь оборудования).

(3) Приводной вал

★ Мы рекомендуем регулярно проводить техническое обслуживание приводного вала. Можете протереть приводной вал мягкой тканью, а затем нанести тонкий слой силиконовой смазки.

(4) Крышка

Очистите крышку тем же способом, что и на шаге (1) выше.

(5) Ротор

★ Для предотвращения коррозии извлеките ротор из камеры ротора. Если вы не используете его в течение длительного времени, снимите крышку ротора и переверните вверх дном, чтобы высушить отверстия для пробирок и сохранить их в чистоте.

★ При утечке образца в роторе промойте ротор водой. Нанесите тонкий слой силиконовой смазки на ротор, когда он полностью высохнет.

★ Ротор должен регулярно обслуживаться, рекомендуется чистить его каждые 3 месяца, чтобы обеспечить чистоту отверстий пробирок и ротора, а затем нанести тонкий слой кремниевой смазки.

9.2 Регулярное обслуживание

В процессе эксплуатации необходимо систематическое техническое обслуживание центрифуги и ее составных частей работниками, которые эксплуатируют и обслуживают центрифугу.

Обслуживание и ремонт Центрифуги осуществляется только после её обесточивания.

(1) Межремонтное обслуживание. Межремонтное обслуживание выполняется персоналом, допущенным к эксплуатации оборудования лаборатории. Межремонтное обслуживание направлено на поддержание центрифуги в постоянной технической готовности и обеспечении бесперебойной ее эксплуатации и заключается в:

- ежедневном протирании рабочей камеры и наружных поверхностей центрифуги нейтральным моющим средством, не допускается использование различных растворителей и бензина;
- ежедневном поддержании необходимой чистоты используемых пробирок и адаптеров;

- периодическом (не реже одного раза в неделю) внешнем осмотре корпуса, сетевого шнура, роторов, адаптеров и других частей центрифуги на предмет исправности, повреждений защитных покрытий, целостности корпуса, изоляции электропроводки, устройства заземления и замены деталей, пришедших в негодность.

(2) Малый (текущий) ремонт. Малый (текущий) ремонт и осмотр выполняется квалифицированным специалистом. Малый (текущий) ремонт и осмотр направлен на выявление дефектов и восстановление нормальной работоспособности центрифуги и её составных частей и осуществляется:

- в случае каких-либо неисправностей или поломок, вызванных использованием прибора, необходимости корректирующего обслуживания;
- с периодичностью от 3 до 6 месяцев в зависимости от интенсивности и условий использования.

(3) После ремонта или установки Центрифуга подвергается частичному техническому освидетельствованию с целью установления, что заменённое, вновь установленное или отремонтированное оборудование находится в исправном состоянии, обеспечивающем безопасную работу

10. Устранение неполадок

10.1 Как открыть крышку

10.1.1 В случае включения питания

⚠ ОСТОРОЖНО

- Крышку просто можно открыть, когда питание включено, и ротор перестаёт вращаться.

Включите выключатель питания, замок крышки автоматически разблокируется. Замок крышки автоматически разблокируется после завершения операции.

Можно отпереть крышку нажатием клавиши  как только ротор остановится.

10.1.2 В случае отключения электроэнергии

Крышка не может быть открыта автоматически при отключении электроэнергии. Его можно открыть вручную.

1. Убедитесь, что ротор перестал вращаться. Внимательно прислушайтесь, чтобы не было слышно вращающегося звука.
2. Два отверстия расположены с обеих сторон в правом верхнем углу крышки. Вставьте отвертку в отверстие и нажмите вперед, чтобы открыть крышку.


11. Инструкции ротора

⚠ ОСТОРОЖНО :

- ★ Внимательно прочитайте инструкцию, правильно используйте ротор.
- ★ Не превышайте допустимую максимальную скорость ротора, пробирки и т.д.

11.1 Инструкции к ротору

11.1.1 Ротор

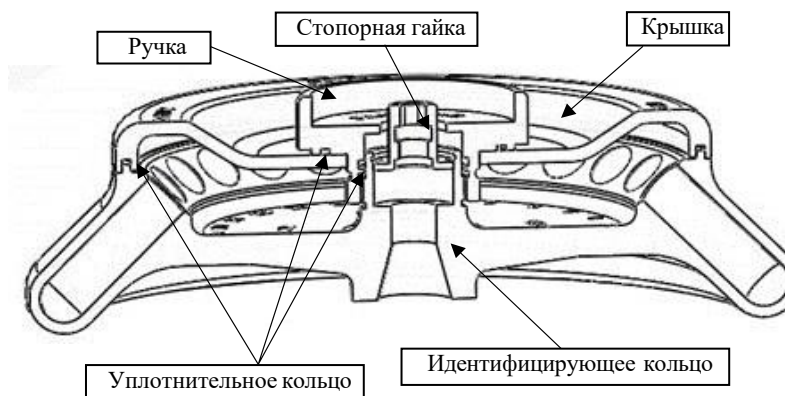

11.1.2 Описание роторов

Все роторы используются для биобезопасности, когда крышка ротора затянута колпачком, центрифужные пробирки будут заключены в ротор, чтобы образец не протекал в центробежном процессе. Если

крышка ротора недоступна, ротор не будет выполнять функцию биоуплотнителя.

Техническое описание роторов представлено в таблице ниже:

Наименование ротора	Схематическое изображение	Максимальная скорость об / мин	Максимальное ускорение RCFx гр	Тип ротора	Материал	Вместимость ротора	Диаметр/высота (мм)	Масса
A8-2P		7000	2680	головой 40°	Акрилонитрил бутадиев стирол Cas № 9003-56-9	Пробирки 2,0/1,5 мл x 8, 0,2 мл x 8, 0,5 мл x 8	90,4 x 22,47	31,4 г
A4-PCR8		7000	2680	Угловой 32.5°	Акрилонитрил бутадиев стирол Cas № 9003-56-9	0,2 мл x 32 ПЦР-стрипов, 0,2 мл x 4 x 8 ПЦР-стрипов	57,9 x 16,5	12 г
Значение допуска от заданного значения ±10%, если не указано иное								

11.1.2 Примечание

1. Ротор центрифуги может отделить образец, плотность которого ниже 2,0 г/мл, если плотность образцов превышает 2,0 г/мл, пожалуйста, рассчитайте допустимую скорость в зависимости от следующей формулы:

Разрешенная скорость (об/мин) = Максимальная скорость × (2,0 (г/мл) / Плотность образца (г/мл))^{1/2}

2. Для предотвращения коррозии извлеките ротор из камеры ротора, если он не используется в течение длительного времени, затем снимите крышку ротора и переверните ротор, чтобы высушить отверстия для пробирок.

3. Если некоторые образцы просочились в отверстие ротора, промойте отверстие водой, нанесите тонкий слой кремниевой смазки на поверхность ротора после высыхания.

4. Это необходимо для регулярного технического обслуживания ротора, рекомендуется чистить его каждые 3 месяца, чтобы сохранить чистку отверстия пробирок и отверстия вала, а затем нанести на него тонкий слой кремниевой смазки.

12. Относительная сила центрифуги (RCF)

Относительная сила центрифуги (RCF) может быть определена по следующей расчетной формуле:

$$RCF = 1.118 \times r \times n^2 \times 10^{-5}$$

где: r – радиус вращения, см; n – скорость вращения, об / мин.

13. Гарантии

(1) Гарантия центрифуги

Эта центрифуга имеет гарантийный срок службы в течение 2-х лет с даты поставки при условии, что она эксплуатировалась и обслуживалась должным образом.

(2) Гарантия ротора

Срок службы ротора составляет 3 года, и мы предлагаем гарантию на 3 года с даты поставки от завода-изготовителя. Пожалуйста, обратите внимание, не используйте ротор после того, как он был поврежден коррозией или имеет структурные повреждения.

(3) Гарантии на центрифугу и ротор становятся недействительными в случае следующих условий, даже если в течение гарантийного срока:

1. Сбои, вызванные неправильной установкой.
2. Неисправности, вызванные грубым или неправильным обращением.
3. Сбои, вызванные транспортировкой или перемещением после установки.
4. Неисправности, вызванные несанкционированной разборкой или модификацией.
5. Неисправности, вызванные использованием нестандартных

запасных частей или аксессуаров и несанкционированной модификацией ротора или центрифуги.

6. Сбои, вызванные стихийными бедствиями, включая пожары, землетрясения и так далее.

14. Послепродажное обслуживание

Для обеспечения безопасной и эффективной работы центрифуги необходимо регулярное техническое обслуживание. Если у центрифуги возникли проблемы, не пытайтесь отремонтировать ее самостоятельно. Обратитесь в наш центр продаж или сервисного обслуживания.

15. Декларация соответствия

В соответствии со следующими стандартами безопасности:
EN 61010-1
EN 61010-2-020
Сконструировано в соответствии со следующими стандартами EMC:
EN 61326-1/ FCC Часть 15 Подраздел B/ IEC 61010-1
Соответствующие руководящие принципы ЕС:
EMC-руководящие принципы: 2004/108/EC Руководящие принципы по приборам: 2006/95/EC Это устройство ISM соответствует канадскому стандарту ICES-001.

Изменения или модификации, явно неодобренные стороной, ответственной за соблюдение требований, могут привести к аннулированию полномочий пользователя на эксплуатацию оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта центрифуга была протестирована и признана соответствующей ограничениям для цифрового устройства класса А в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при эксплуатации центрифуги в коммерческих условиях. Центрифуга

генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если она не установлена и не используется в соответствии с руководством пользователя, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Работа центрифуги в жилом районе, вероятно, вызовет вредные помехи, и в этом случае пользователю потребуется устранить помехи.

16. Маркировка

Список всех используемых условных знаков на маркировке центрифуги и ее компонентов:

Условный знак	Значение	Размещение
	Внимание, опасное напряжение	Этикетка центрифуги
	Включено (питание)	Кнопка включения/выключения центрифуги
	Оборудование, защищенное двойной изоляцией или усиленной изоляцией	Этикетка центрифуги
	Переменный ток	Этикетка центрифуги и картонной упаковки
	Выключено (питание)	Кнопка включения/выключения центрифуги
	Медицинское изделие для диагностики in vitro	Этикетка картонной упаковки
	Данный продукт подлежит вторичной переработке	Этикетка центрифуги и картонной упаковки
	Продукт соответствует Директиве Совета ЕС 2014/30/EU Электромагнитная	Этикетка центрифуги и картонной упаковки

	совместимость	
	Продукт соответствует Директиве 93/42/ЕЕС. Маркировка CE	Этикетка центрифуги и картонной упаковки
	Внимание, опасность	Этикетка центрифуги
	Верх	Картонная упаковка изделия
	Хрупкое. Осторожно	Картонная упаковка изделия
	Беречь от влаги	Картонная упаковка изделия

- Центрифуга после окончания использования утилизируется как промышленные отходы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 и действующими на момент утилизации государственными правилами по утилизации электронного оборудования.

- Утилизация принадлежностей должна проводиться после их дезинфекции разрешёнными методами и в соответствие с СанПиН 2.1.3684-21.



Символ перечеркнутого контейнера для отходов указывает на то, что устройство не должно утилизироваться вместе с бытовыми отходами.

17. Упаковка

Центрифуга и ее компоненты упакованы должны быть в отдельные пластиковые пакеты, которые затем складываются в отдельные коробки из гофрированного картона. Вставки из вспененного полиуретана используются для фиксации устройств в коробках.

В каждую коробку с центрифугой должна быть вложена эксплуатационная документация. Упаковка должна обеспечивать при транспортировании и хранении защиту от механических и климатических воздействий.

Конструкция упаковки должна исключать перемещение изделия в ней.

18. Порядок утилизации или уничтожения изделия

- Перед утилизацией устройство должно быть обеззаражено и очищено для защиты людей, окружающей среды и имущества. При утилизации устройства необходимо соблюдать соответствующие установленные законом правила.